


# Akumulátorová ústní sprcha

**Model WT3900** — Před použitím výrobku si prosím tyto pokyny důkladně prostudujte. Manuál si uschovejte pro případ potřeby.

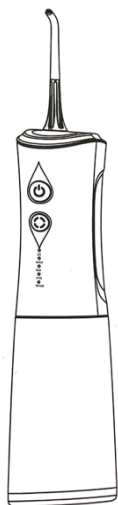

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující informace popisují správný a bezpečný způsob používání tohoto přístroje, jehož dodržováním předejdete jakémukoli možnému poranění či poškození přístroje.

## PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE TYTO POKYNY

### NEBEZPEČÍ


- Přístroj není určen pro děti kojeneckého věku a osoby nezpůsobilé k jeho používání. Udržujte mimo dosah dětí.
- Přístroj nijak neupravujte. Nepokoušejte se jej ani rozebrat či opravovat.
- Přístroj neopouštějte na místě, ze kterého by mohl spadnout či být shozen do vany nebo umyvadla.
- Přístroj nesmí zůstat dlouhou dobu ponořený ve vodě.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně.

## VAROVÁNÍ

- Přístroj nesmí zůstat dlouhou dobu ponořený ve vodě. Děti od věku 8 let a osoby se sníženými pohybovými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou ústní sprchu používat pouze pod dozorem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Přístroj nabíjejte pouze pomocí zdroje napájení dodávaného společně s přístrojem.
- Před likvidací přístroje je nutné z něj nejdříve odstranit baterii.
- Během odstraňování baterie přístroj nesmí být připojen k elektrické zásuvce.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Do nádržky na vodu nenalévejte vodu s teplotou vyšší než 40 °C. Dojde-li k poškození adaptéru, zástrčky či kabelu, okamžitě jej přestaňte používat.
- Neponechávejte kabel na topení ani jiném horkém povrchu.
- Ztratíte-li trysku, přístroj prosím nepoužívejte.
- Neponechávejte přístroj dlouhodobě ponořený ve vodě.
- Přístroj používejte pouze pro čištění ústní dutiny a k žádnému jinému účelu.
- Udržujte trysku mimo dosah malých dětí. Tryska je dostatečně malá na to, aby ji dokázaly spolknout, mohla by jim tak uvíznout v krku.
- Některé typy ústní vody mohou mít na přístroj škodlivý vliv a způsobit popraskání krytu nebo nádržky na vodu. Proto prosím do nádržky ústní vodu nenalévejte.
- Pokud budete pociťovat bolest zubů či dásní a nebude pro Vás možné přístroj používat, obraťte se prosím na svého zubaře.
- Netiskněte trysku k zubům či dásním příliš silně.

## TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

### Diagram výrobku

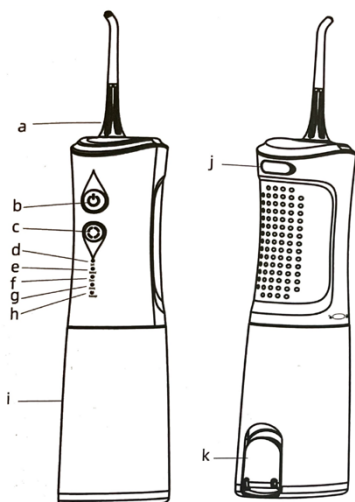


- a) Tryska
- b) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- c) Tlačítko pro výběr čistícího režimu
- d) Indikátor režimu Jemný (Soft)
- e) Indikátor režimu Čištění (Clean)
- f) Indikátor režimu Silný (Strong)
- g) Indikátor režimu Masáž (Massage) / indikátor nabíjení
- h) Vodní nádržka
- i) Nabíjecí základna
- j) Krytka nádržky na vodu

### Poznámka:

Může se stát, že při prvním použití objevíte stopové množství kapaliny uvnitř nádrčky, nasávací trubičky či v jiné části přístroje. Jedná se o destilovanou vodu z kontrolní zkoušky průtoku, která je zdravotně zcela nezávadná.

## Postup nabíjení

Pro nabíjení lze použít následující typy zařízení (Obr. 1)

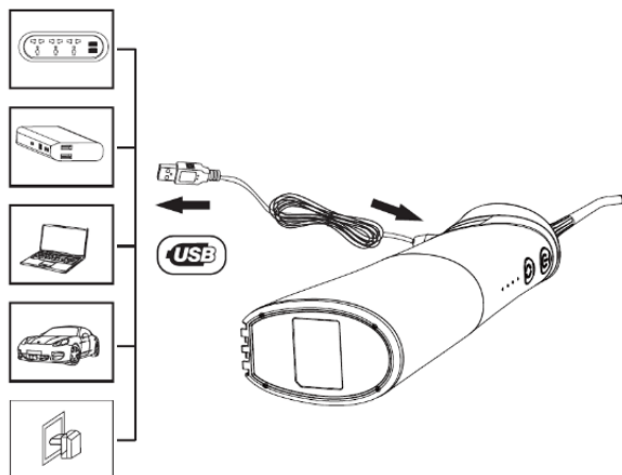

Obr.1


1. Sejměte kryt nabíječky a pevně zasuňte zástrčku do spotřebiče.
2. Před vložením se ujistěte, že v zásuvce nezůstala žádná tekutina

### Indikátor Baterie


1. Sprcha musí být nabíjena přiloženým USB kabelem. Doba nabíjení je cca 5 hodin
2. Pokud je baterie mezi 10 % a 100 % nezobrazuje se žádné upozornění
3. Pokud baterie klesne pod 10 %, LED dioda upozorní na nízkou kapacitu baterie

## Návod k použití

1. Otevřete víko nádrčky na vodu a naplňte ji vodou o teplotě maximálně 40 °C, poté víko zavřete. (Obr. 2)

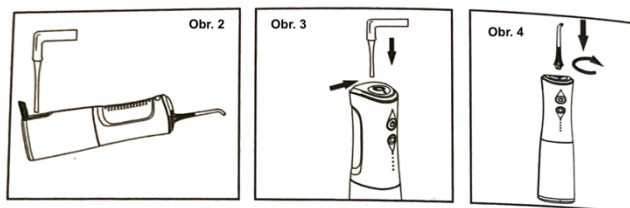

2. Před prvním použitím prosím nalijte malé množství vody do vodní výpusti. (Obr. 3)
3. Připevněte trysku k rukojeti a otočte po směru hodinových ručiček (Obr. 4)
4. Postup připojení nádrčky: přiložte nádrčku na vodu do správné polohy a poté otočte tělem ústní sprchy ve směru podle hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí – nádrčka je připevněna k tělu ústní sprchy. (Obr. 5)

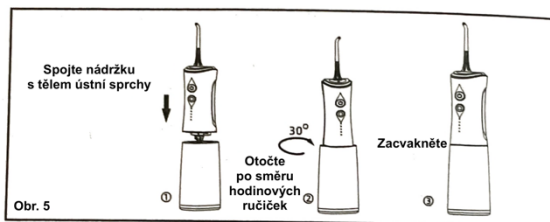


5. Postup odpojení nádrčky: Otočte tělem ústní sprchy proti směru hodinových ručiček, abyste nádrčku odpojili od těla ústní sprchy. (Obr. 6)



6. Pokyny k obsluze (Obr. 7)
- 1) První tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí ústní sprchy, druhé tlačítko k volbě režimů.
- 2) Zatímco je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko volby režimu. Režimy mohou být Jemný, Standardní, Čištění, Silný a Masáž


- 3) Ukazatel nabíjení – LED světlo nabíjení (u režimu Masáž) bliká červeně v průběhu procesu nabíjení. Když je baterie plně nabita, LED dioda svítí po dobu dvou minut a následně zhasne.

- **Jemný:** Pro citlivé dásně, nebo pro první použití ústní sprchy.
- **Standardní:** Pro citlivé dásně a běžné čištění.
- **Čištění:** pro běžné čištění
- **Silný:** pro hloubkové čištění těžko přístupných míst
- **Masáž:** intenzita proudu vody je přizpůsobena pro masáž dásní.

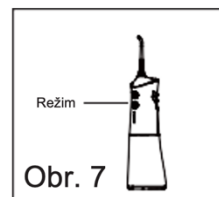


- 4) Udržujte hrot trysky nasměrovaný k zubům ve vertikální poloze.  
5) Ústa mějte mírně otevřená, aby mohla voda vytékat ven.  
6) Začněte s čištěním. (Obr. 8)

- 1). Tryskající vodu směřujte k zubům a dásním pod úhlem 90 stupňů.
- 2). Pomalu trysku navádějte kolem zubů.
- 3). Tryskající vodu navádějte podél linie dásní s hrotem trysky pod úhlem 90 stupňů ke tkáni dásní.
- 4). Důkladně očistěte místa mezi zuby a případně kolem rovnátek, korunek či můstků.

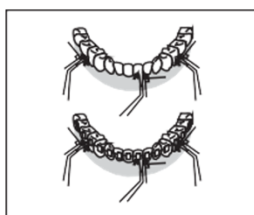

Obr. 8

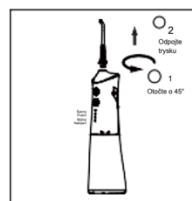

Obr. 9

#### Po použití ústní sprchy

- Jakmile jste s čištěním hotovi, stiskněte tlačítko vypínače („On/Off“) a přístroj vypněte.
- Otočte tryskou proti směru hodinových ručiček a zdvihnutím ji odejměte. (Obr. 9)
- Otevřete víko nádržky na vodu a zbývající vodu vylijte.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka vypínače a nechte odtéct veškerou zbývající vodu.
- Vypněte přístroj opětovným stisknutím tlačítka vypínače a zavřete víko nádržky na vodu.
- Přístroj otřete suchým hadříkem.

#### Poznámka:

Z důvodu prevence rozmnožování bakterií je nutné zajistit, aby v přístroji nezůstala žádná zbývající voda. Víte-li, že přístroj delší dobu nepoužijete, musíte jej před uskladněním důkladně otřít a vysušit.

#### Údržba

Pro čištění přístroje používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte žíraviny nebo abrazivní prostředky (např.: ocet nebo odstraňovač vodního kamene), protože by mohly přístroj poškodit. Neomývejte horkou vodou s teplotou vyšší než 40 °C. Přístroj chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním světlem.

#### Hlavní jednotka

- Pro odstranění nečistot použijte tekuté mýdlo, poté ji otřete suchým hadříkem.
- Hlavní jednotku během čištění neponořujte do vody.
- Po omytí vodou ji vysušte.

#### Víko nádržky na vodu

Případnou špínu a nečistoty setřete hadříkem.

#### Tryska

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Každých 6 měsíců vyměňte trysku za novou.

#### Nasávací hadička

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Hadičku neohýbejte, neroztahujte a ani s ní nekrutěte.

#### Nádržka na vodu

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Víte-li, že ji delší dobu nebudete používat, důkladně ji vysušte.

## Řešení obtíží

### Problém

1. Přístroj nefunguje
2. Přístroj funguje jen pár minut, přestože byl nabit
3. Tlak vody je velmi slabý
4. Voda vůbec nevytéká

### Možné příčiny

1. Výrobek jste si právě zakoupili, případně nebyl používán po dobu delší 3 měsíců.
2. Baterie dosáhla konce své životnosti.
3. Doba nabíjení byla příliš krátká.
4. Tryska je ucpaná nánosem nečistoty.
5. Tryska je zdeformovaná.
6. Filtr je ucpaný nánosem nečistoty.
7. Nádržka na vodu je prázdná.
8. Ústní sprchu během používání příliš nakláníte.
9. Ventilová deska je zdeformovaná.

### Řešení

1. Nechte přístroj nabíjet po dobu minimálně 5 hodin
2. Požádejte servisní centrum o radu
3. Vyměňte trysku
4. Vyčistěte filtr
5. Naplňte nádržku vodou
6. Během použití držte přístroj ve vertikální poloze
7. Nalijte malé množství vody do vodní výpusti

[www.drmayer.cz](http://www.drmayer.cz)  
[info@drmayer.cz](mailto:info@drmayer.cz)



Vyrobena v Číně