

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA ŠÍJI A KRK SHIATSU

BH-12821

BASS
POLSKA
HOME & LINE



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. URČENÍ	6
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
V. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU	7
VI. POUŽÍVÁNÍ	7
VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy náradí a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BH-12821

I. ZÁRUKA A SERVIS

Informace o servisu a záruce:

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

telefon reklamace, servis:

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

OZNAČENÍ A ČÍSLA

Každé zařízení má identifikační štítek CE, který obsahuje nejen certifikační značku CE, ale také následující informace:

- Název výrobce
- Model / sériové číslo
- Hmotnost
- Otáčky motoru

Na krytu zařízení je typový štítek. Na štítku jsou výstražné značky a rok výroby.

BEZPEČNOST SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM A ÚDRŽBOU

1. Nikdy nepřipojujte zařízení k napájecí síti, pokud napětí není v souladu se specifikací výrobku.
2. Výrobek se při kontaktu s vodou poškodí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
3. Nepoužívejte zařízení při teplotách vyšších než **40°C**.
4. Udržujte masážní přístroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte přímému působení slunečního světla.
5. Pokud je jakákoliv část masážního přístroje poškozena, nepoužívejte ho. Kontaktujte servis výrobce.
6. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
7. Nezapomeňte po každém použití zařízení vypnout přepínač napájení a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
8. Při delším používání se může zařízení zahřát. Osoby citlivé na teplo by neměly zařízení používat příliš dlouho.
9. Masážní přístroj je vybaven funkcí ochrany proti přehřátí. Pokud se zařízení příliš zahřeje, automaticky se vypne. Zařízení lze znovu zapnout až po jeho vychladnutí.
10. Nedovolte dětem používat masážní přístroj bez dozoru.
11. Nepoužívejte zařízení k masáži citlivých oblastí těla, jako jsou: zápěstí, prsa, lokty, intimní místa.
12. Používání masážního přístroje těhotnými ženami, staršími lidmi a chronicky nemocnými lidmi je třeba konzultovat s lékařem.
13. Nepoužívejte zařízení **déle než 10 - 15 minut v kuse**. Celková doba masáže by neměla přesáhnout **30 minut**.
14. Ujistěte se, že se strany zařízení během masáže krku nedotýkají šíje.
15. Ujistěte se, že během masáže neusnete.
16. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

JE ZAKÁZÁNO:

-
- x Uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti možnosti úrazu elektrickým proudem.
 - x Provádění změn v používaném zařízení.
 - x Odstraňování ochrany, zabezpečení, zkratování relé, blokování spínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistek.
 - x Tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
 - x Používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou.
 - x Přetěžování elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu.
 - x Ponechání bez dozoru elektrických zařízení připojených k síti. Před opuštěním pracoviště je třeba odpojit všechna elektrická zařízení od sítě.
 - x Umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY


-
1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
 2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - Uvolněte osobu, která je pod napětím.
 - Tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 - Elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska).
 - Po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života.
 - Osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchajících osob, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka.
 - Pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz.
 - V každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

III. URČENÍ

Masážní přístroj na šíji a krk Shiatsu Vám umožní provádět profesionální masáž v soukromí Vašeho domova a účinně nahradí kvalifikovaného maséra. Masážní přístroj na krk a šíji využívá různé masážní metody spojující tradiční a moderní techniky pro vaše zdraví a pohodlí.

Použití:

- ✓Bolesti zad
- ✓Bolesti páteře, bederní oblasti
- ✓Bolesti krku
- ✓Svalové křeče
- ✓Ischias
- ✓Podpora rehabilitace při snížené pohyblivosti kloubů
- ✓Urychlení regenerace svalů
- ✓Redukce celulitidy

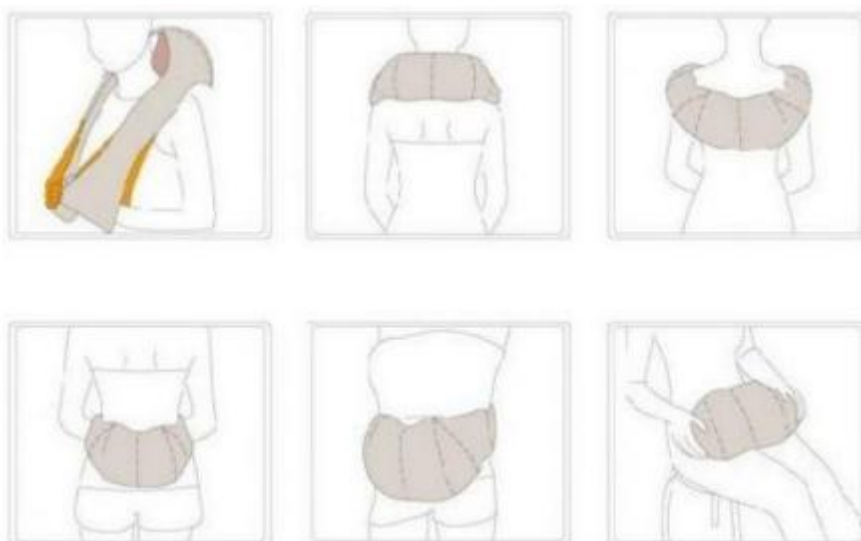

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH-12821
Výkon	24 W
Napětí	220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Nabíječka	12 V, 2000 mAh
Rozměry	41 x 17 x 50 cm

V. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU



1. Spínač/vypínač ohřevu.
2. Tlačítko ON/OFF.
3. Změna směru masáže.

VI. POUŽÍVÁNÍ

1. Spustíte masážní přístroj stisknutím prostředního tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu.
2. Zapnou se dvě masážní hlavice.
3. Chcete-li změnit směr masáže, stiskněte tlačítko označené šipkami.
4. Hlavice se přestanou otáčet a po cca 1-2 sekundách se začnou otáčet v opačném směru.
5. Chcete-li znovu změnit směr, stiskněte znovu tlačítko pro změnu směru masáže.
6. Chcete-li spustit funkci ohřevu, stiskněte tlačítko označené vlnovkami.
7. Masážní hlavice se rozsvítí červeně a masážní přístroj začne ohřívat vybranou část těla.
8. Chcete-li funkci ohřevu vypnout, stiskněte znovu spínač/vypínač ohřevu.
9. Chcete-li masážní přístroj vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF.
10. Masážní hlavice se okamžitě zastaví.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Masážní přístroj na krk, šíji a záda
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)

Model (obchodní označení) BH-12821

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2014/30/EU
2. 2014/25/EU


Podle norem:

EN 60335-1:2012+A11:2014/AC:2004
EN 55014-1:2017
EN 55014:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

Certifikační orgán: UTS, United-standard Testing & Certification centre, Shanghai, Čína

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak



Marek Belniak

2. 2. 2010
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko